


CHEM-WELL T

Analizador de Química Clínica

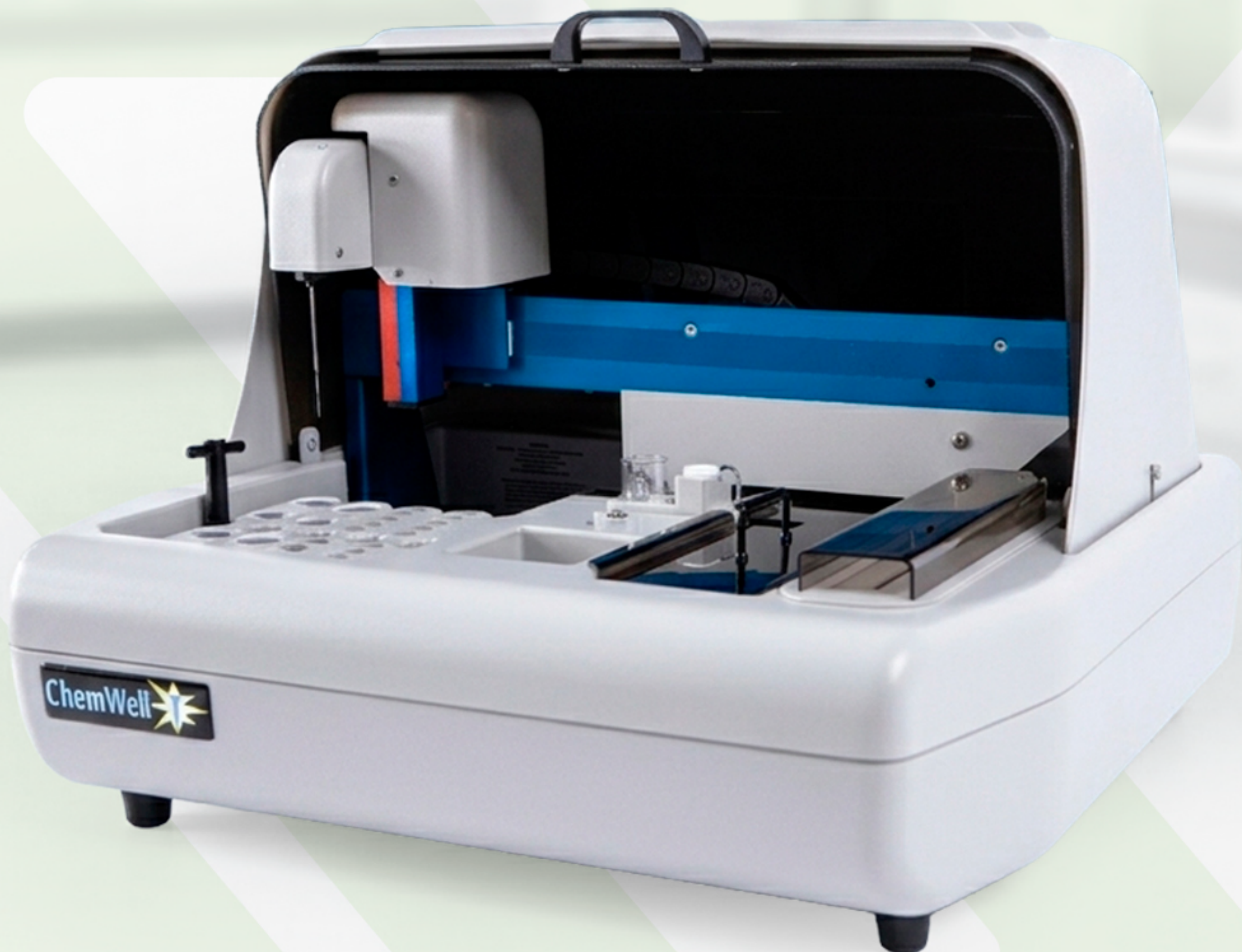

- Equipo Automático capaz de realizar técnicas de bioquímica clínica y turbidimetría, con capacidad de trabajo hasta 100 pruebas/hora.

SKU: 7001319

MEXLAB®

Características

Descripción del equipo

Equipo Automático capaz de realizar técnicas de Bioquímica Clínica y Turbidimetría, con capacidad de trabajo de hasta 100 pruebas por hora.

Requiere de computadora con sistema operativo Windows XP, Vista, 7 y 8. Su software está diseñado para un manejo de modo intuitivo, además de contar con diferentes niveles de acceso para controlar usuario.

Especificaciones técnicas

- **Volumen de reacción**

<250 µl hasta 500 µL

- **Filtros IAD**

- 340, 405, 505, 545, 580 y 680
- 620 nm

- **Refrigeración integrada**

- **Sistema de incubación con temperatura ambiente de 30 y 37 °C**

- **Tipos de técnicas**

- Punto final
- Cinéticas
- Tiempo fijo

- **Aguja con sensor de líquidos y anticolisión**

- **Aspira volúmenes de 2 µL a 450 µL**

- **Funciones**

- Predilución
- Dilución
- Dispensados de muestras
- Reactivos

- **Sistema óptico monocromático y dicromático**

- **Precisión volumétrica de +/- 3%**

- **Paquete de control de calidad completo con grafica automática de Levy-Jennings**

- **Mezclado**

La jeringa oscila con capacidad de ajuste y tiempo.

- **Dimensiones y peso**

53cm (largo) x 40cm (profundidad) x 50cm (altura) y 15 kg